


# IDEXX Cancer Dx™ Test

## Interpretation der Ergebnisse bei klinisch erkrankten Hunden

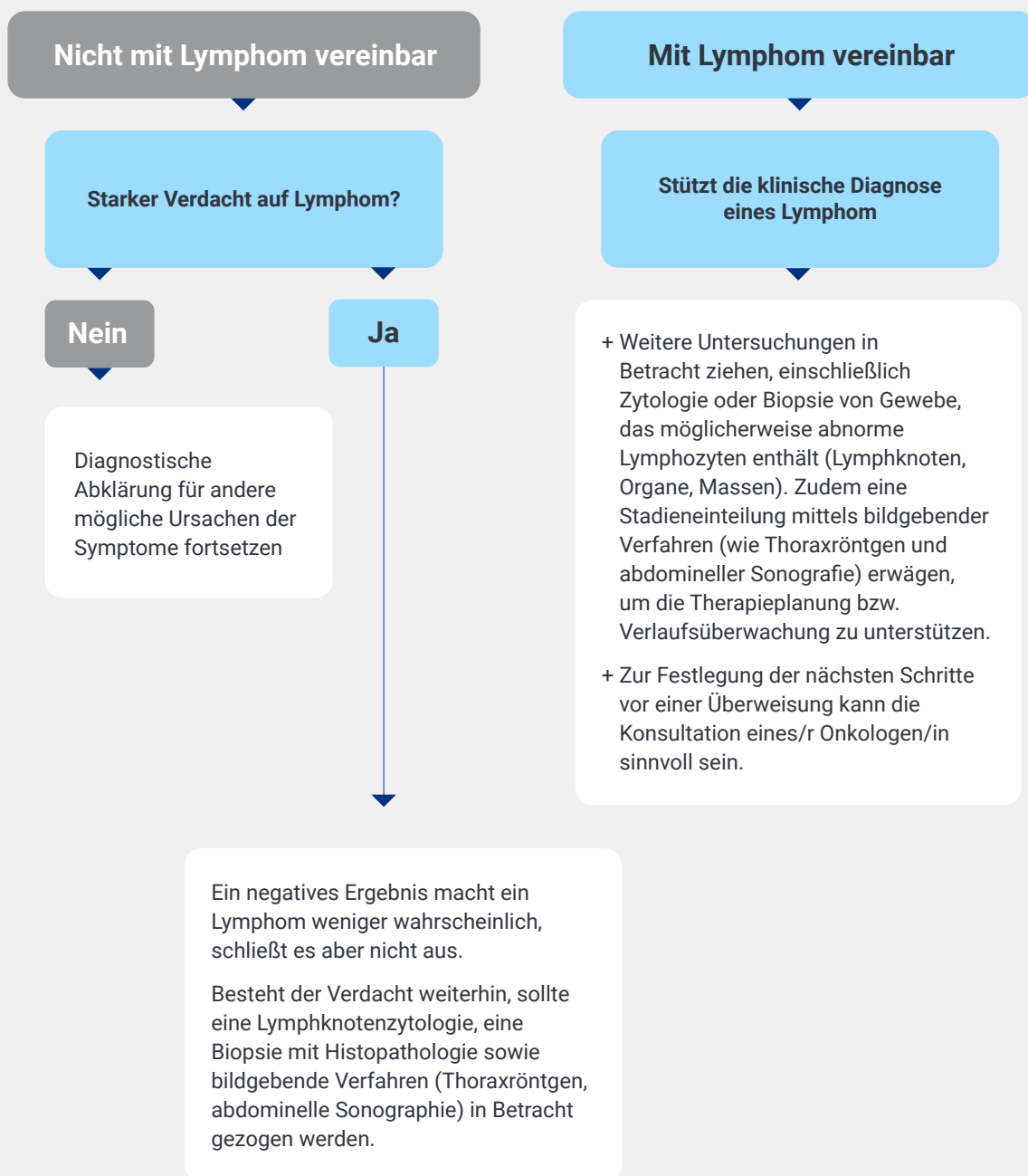

# IDEXX Cancer Dx™ Test

## Interpretation der Ergebnisse bei klinisch gesunden Hunden

### Nicht mit Lymphom vereinbar

Das Ergebnis spricht dafür, dass kein nachweisbares Lymphom vorhanden ist; der Patient sollte bei der nächsten regulären Vorsorgeuntersuchung erneut evaluiert werden.\*

### vereinbar mit einem Lymphom

**Ausführliche Anamnese, klinische Allgemeinuntersuchung und Blutuntersuchung**

**Zur Bestätigung des Vorliegens einer Erkrankung können weitere Untersuchungen in Betracht gezogen werden, beispielsweise:**

- + Aspirate oder Biopsie von Lymphknoten/Organen
- + Bildgebende Diagnostik (Thoraxröntgen und abdominelle Sonographie)
- + Durchflusszytometrie des Blutes bei Lymphozytose

**Wird kein Lymphom nachgewiesen, sollte nach 8 – 12 Wochen eine erneute klinische Untersuchung erfolgen (beim Auftreten neuer Symptome früher).**

\*Die American Animal Hospital Association (AAHA) empfiehlt Routineuntersuchungen alle 6 Monate für ältere Hunde und jährlich für alle anderen Hunde.<sup>1</sup>

IDEXX GmbH  
Humboldtstr. 2  
70806 Kornwestheim  
idexx.de

IDEXX Vet Med Labor GmbH  
Börsegasse 12/1  
1010 Wien  
idexx.at

IDEXX Diavet AG  
Schlyffstr. 10  
8806 Bäch  
idexx.ch

#### Literatur

1. Creevy KE, Grady J, Little SE, et al. 2019 AAHA Canine Life Stage Guidelines. *J Am Anim Hosp Assoc.* 2019;55(6):267–290. doi:10.5326/JAAHA-MS-6999